

kitlab

MANUAL DE USUARIO

Baño Seco Termoblock DBI-11




Kitlab

BAÑO SECO TERMOBLOCK

DBI-11

PANEL PRINCIPAL:

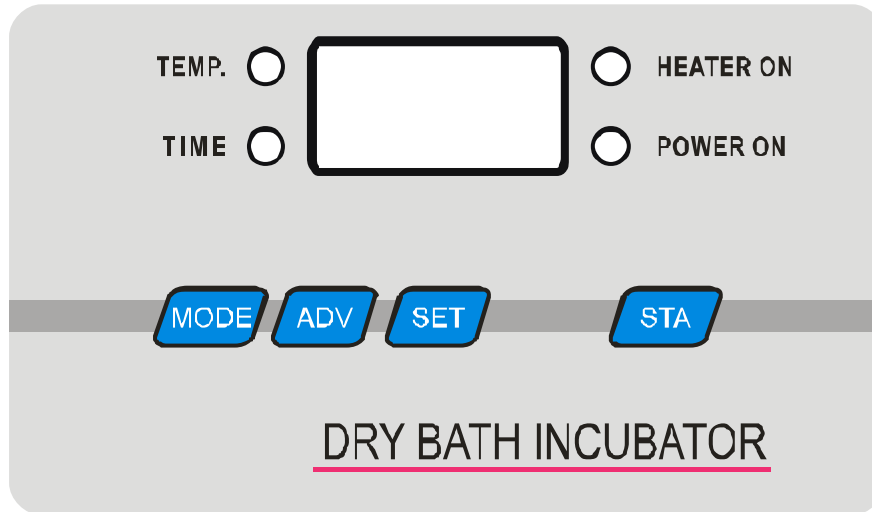

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA INCUBADORA DE BAÑO SECO:

1. Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica
2. Pulse el interruptor de encendido "ON", que está en la parte de atrás para aplicar potencia
3. LED de encendido y de la pantalla con la temperatura predeterminada y temporizador (37 y 30 minutos, respectivamente) se iluminará. Display cambiará con la temperatura y el modo de temporizador después de cada 5 segundos.
4. Ajuste la temperatura y temporizador necesario, con la ayuda de la tecla MODE, SET y ADV.

MODE : Cambia el modo (por ejemplo, temperatura y modo de hora)

SET : Shift parpadear dígitos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda

ADV : Incremento de parpadear dígitos

Ejemplo: Para ajustar la temperatura de 53.5 y el temporizador en 25 minutos.

En primer lugar establecer el modo de temperatura con la ayuda de la tecla **MODE** (cuando TEMP Led brillará significa modo de temperatura está establecido) y ajuste la temperatura 53.5. Si el dígito del lado izquierdo parpadea, pulse la tecla **ADV** y establecer el dígito 5. Pulse la tecla **SET** de modo dígito medio empezará a parpadear y set 3 con la ayuda de la tecla **ADV**. Del mismo modo establecer el dígito lado derecho en 5 con la ayuda de la tecla **SET** y **ADV**. De modo que la temperatura se fijó en 53,5. Para ajustar el temporizador a 25 minutos presione la tecla **MODE** y ajuste el modo de temporizador (cuando el tiempo llevó resplandor que significa el modo de hora está configurado) y luego hacer lo mismo procedimiento de ajuste de temperatura superior para ajustar el cronómetro en 25 minutos.

3. Pulse la tecla de **STA**, por lo que el proceso se iniciará y el temporizador se iniciará para el conteo inverso
4. **CALENTADOR DE Led** comenzará cuando calentador está sobre.
5. Después de completar el proceso, que es fijado por el temporizador, pantalla sólo mostrará la temperatura con el sonido intermitente del zumbador.
6. Para el nuevo proceso con el anterior de temperatura y el tiempo de ajuste, pulse la tecla **START**, de lo contrario Repita los pasos 4 y 5.

PRECAUCIÓN: -.

- No ponga la temperatura alta durante más de 20 minutos, lo cual puede dañar el calentador.
- Es aconsejable mantener la máquina en el lugar más fresco para un mejor resultado.