

SCOPEPAD-LX105

Manual de operación

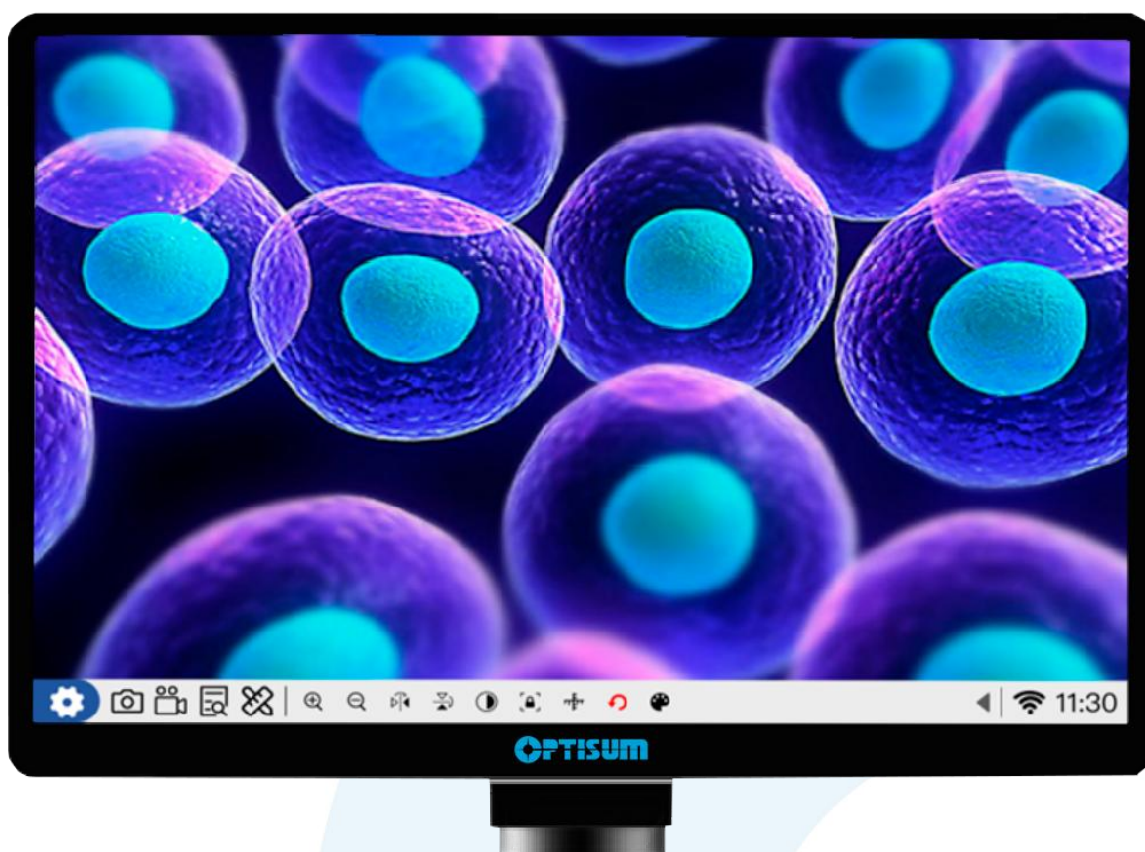

Especificación

Especificaciones.	Modelo	Scopepad-LX105
	Categoría	Cámara de tableta con sistema Android 11 todo en uno HD
	Sensor	Sensor de 1/2"
	Píxel efectivo	8 millones
	Pantalla	Pantalla táctil de alta definición de 10,5"
	Sistema operativo	Android 11
	Wifi	WIFI de doble banda de 2,4 GHz / 5 GHz, compatible con WIFI6
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
	Salida	USB3.0 * 2, USB2.0 * 1, HDMI, puerto LAN Gigabit
	Tamaño de píxel	2.0um * 2.0um
	Poder	DC-12V/2A
Función	Función básica	Interacción con Android, software de medición seye2.0
	Ajuste de imagen	Brillo, contraste, saturación, temperatura de color
	Función de cámara	Espejo, volteo, congelación, blanco y negro
	Interfaz de usuario	Admite una operación táctil y de mouse fácil de usar
	Foto, vídeo	Admite captura de imágenes de 16 millones y video 1080P
	Almacenamiento	Grabación instantánea de fotos y videos, vista previa de imágenes
	Función de marcado	Coordenadas de punto, punto de mira, sistema de coordenadas, anotaciones de texto
	Medición de longitud	Longitud de línea recta, longitud de línea plegada, longitud de curva, distancia de línea paralela, distancia de línea de punto
	Medición geométrica	Longitud del segmento de línea, círculo fijo de radio, círculo fijo de dos puntos, círculo fijo de tres puntos, círculo concéntrico, círculo fijo de radio, círculo fijo de dos puntos, círculo fijo de tres puntos
	Medición del área geométrica	Polígono, rectángulo
	Sistema de medición	Software S-EYE incorporado
Paquete	Tamaño	238.00 * 51.00 * 206.00 mm
	Peso	0,6 kg
	Accesorio	Alimentación DC-12V/2A

Introducción del producto



Características principales


- 1.- Cámara de tableta inteligente del sistema Android 11.
- 2.- Pantalla HD 3:2 de 10,5", mejor campo de visión.
- 3.- Cámara 4K de superficie de destino 1/2 incorporada, los detalles son claramente visibles.
- 4.- Múltiples interfaces externas, fáciles de usar.
- 5.- Sistema de entretenimiento de audio incorporado, es un dispositivo de la industria y un dispositivo de entretenimiento.
- 6.- WIFI 6 adaptable, interactivo y buen asistente de enseñanza.

Operación


- 1.- En primer lugar, el producto se conectará a la alimentación DC-12V.
- 2.- Después de conectar la alimentación, presione el botón de encendido, la luz azul permanece encendida.
- 3.- Después del encendido, el sistema directamente en la interfaz de vista previa de la imagen.
- 4.- Puede conectar la pantalla grande a través de la interfaz HDMI de acuerdo con las necesidades reales.
- 5.- Puede realizar la medición de imagen correspondiente y el ajuste de parámetros en la interfaz del software según sea necesario.

Introducción a S-EYE2.0

Modo de interfaz principal

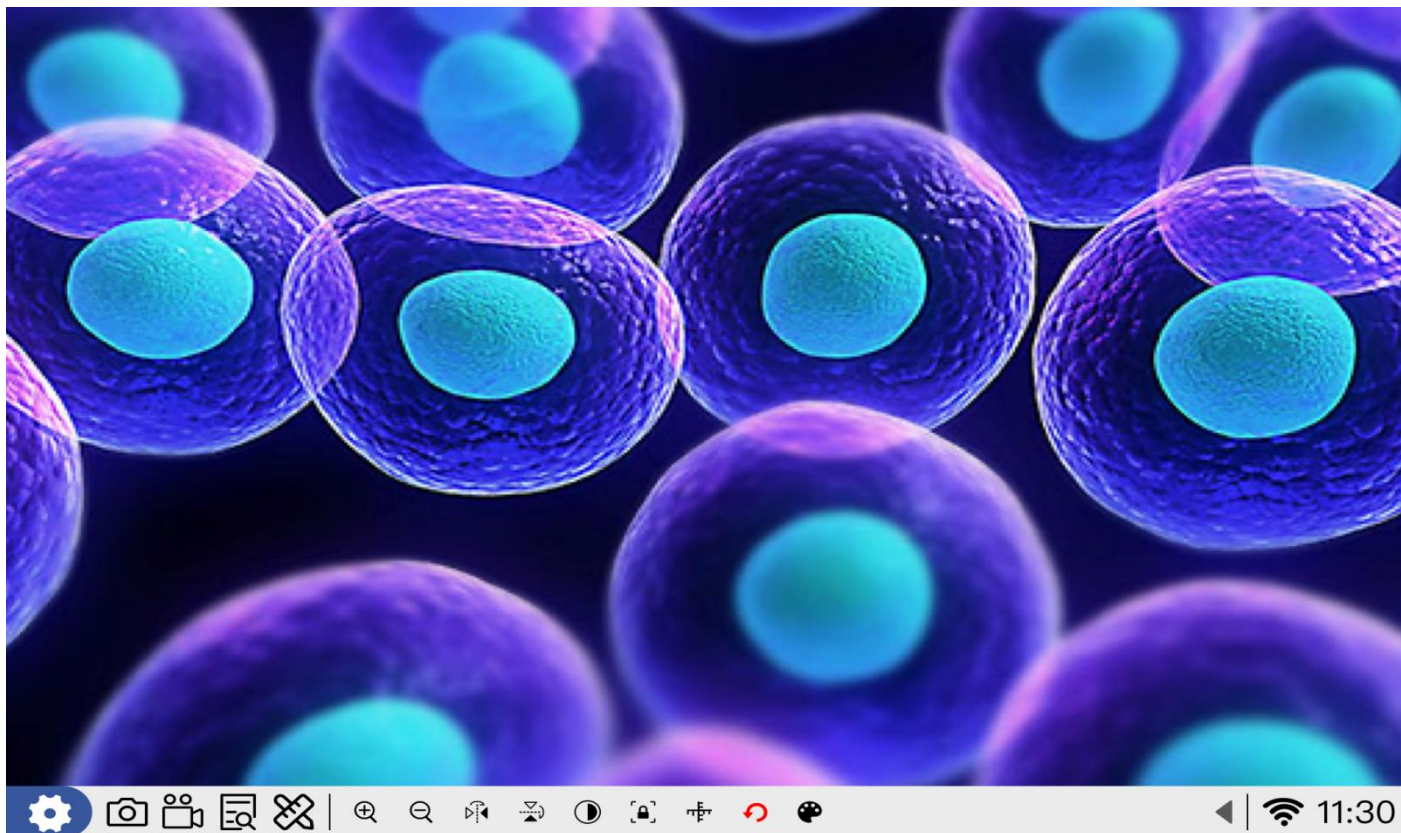

La cámara ingresa a esta interfaz directamente después de encenderse, y puede realizar configuraciones de acceso directo para la cámara en la barra de estado según sea necesario.

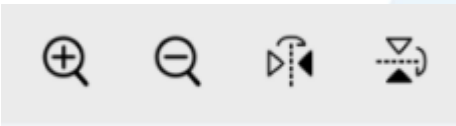
- 1)  Los iconos están en orden para la imagen configuración, foto, video, vista previa, medición y otras funciones.
- 2)  Los iconos están en orden para que la imagen se acerque, se aleje, se refleje, se vuelva, etc.
- 3)  Los iconos están en orden para el modo en blanco y negro, el modo de congelación de imagen, el interruptor de escala central, el restablecimiento de parámetros de imagen, el ajuste de color y tamaño de la configuración de la línea de escala.

- 4) Los iconos establecerán la hora, el WIFI y otros parámetros.



Los botones son para configurar el sonido de la pantalla, el brillo de la pantalla, el modo del navegador IE, la configuración del Explorador, la configuración del cable, etc.

Modo de configuración

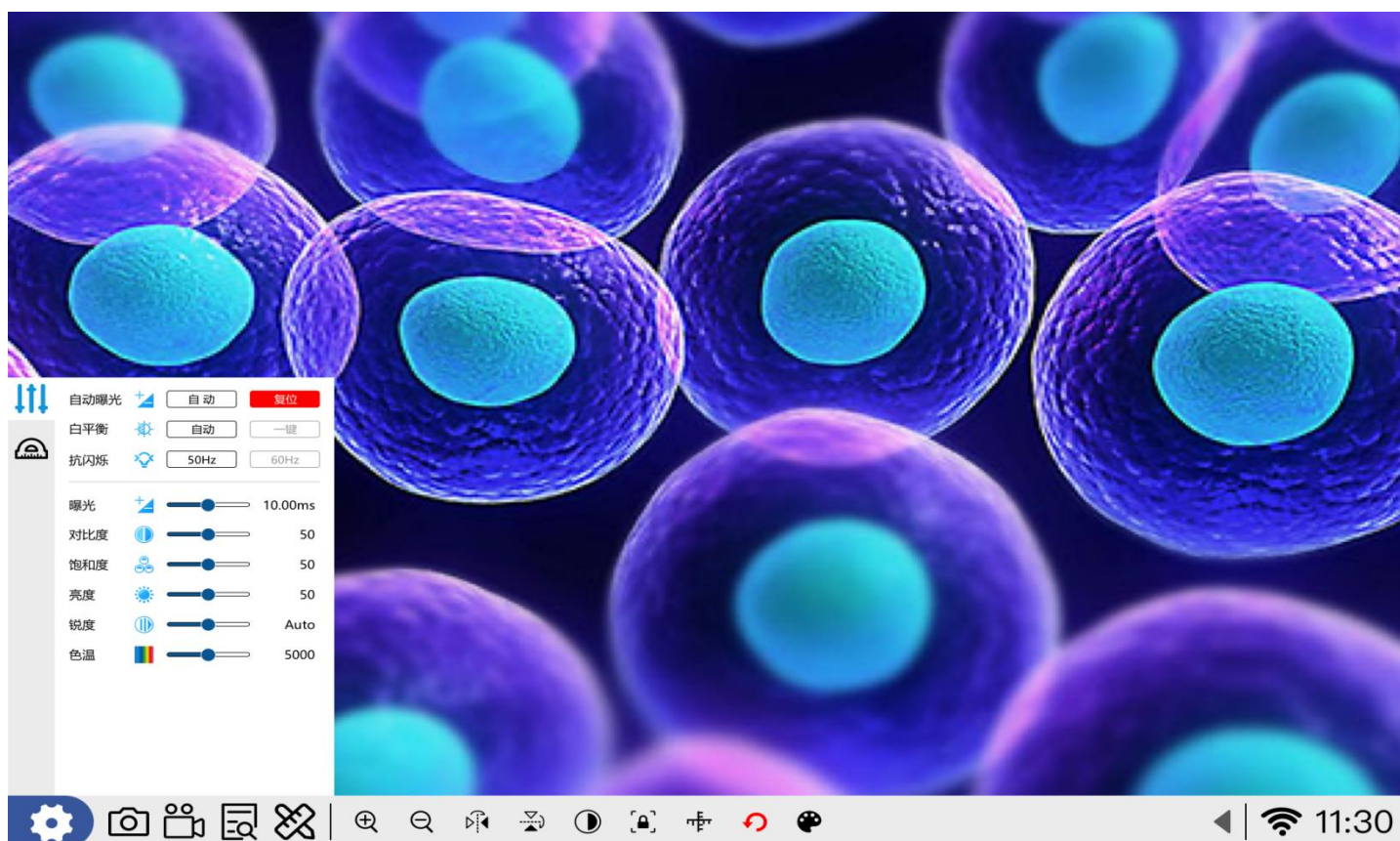


- 1.- Después de encender la cámara directamente en la pantalla como se muestra.
- 2.- Haga clic en el botón para abrir el menú como se muestra. 
- 3.- Puede configurar los parámetros de la imagen según la demanda.

(1) Exposición automática: proporciona dos modos de configuración manual y configuración automática, y el sistema predeterminado es el modo automático.

- (2) Balance de blancos: proporcione dos modos de automático y de un toque, el sistema predeterminado modo automático. (Bajo la temperatura de color estándar, el modo de un toque es hacer clic en el botón de un toque cuando la lente está frente a una luz estándar o papel blanco, la cámara cargará automáticamente los parámetros de acuerdo con el estado actual, para lograr el propósito de corregir el balance de blancos).
- (3) Anti-parpadeo: el sistema proporciona 50HZ y 60HZ opcionales.
- (4) Exposición: ajuste el tiempo de exposición de la cámara según la necesidad.
- (5) Contraste: ajuste el contraste de la imagen según sea necesario.
- (6) Saturación: ajuste la saturación de la imagen según sea necesario.
- (7) Brillo: ajuste el brillo de la imagen según sea necesario.
- (8) Nitidez: ajuste la nitidez de la imagen según sea necesario.
- (9) Temperatura de color: ajuste la temperatura de color de la imagen según sea necesario.

Ajuste de calibración

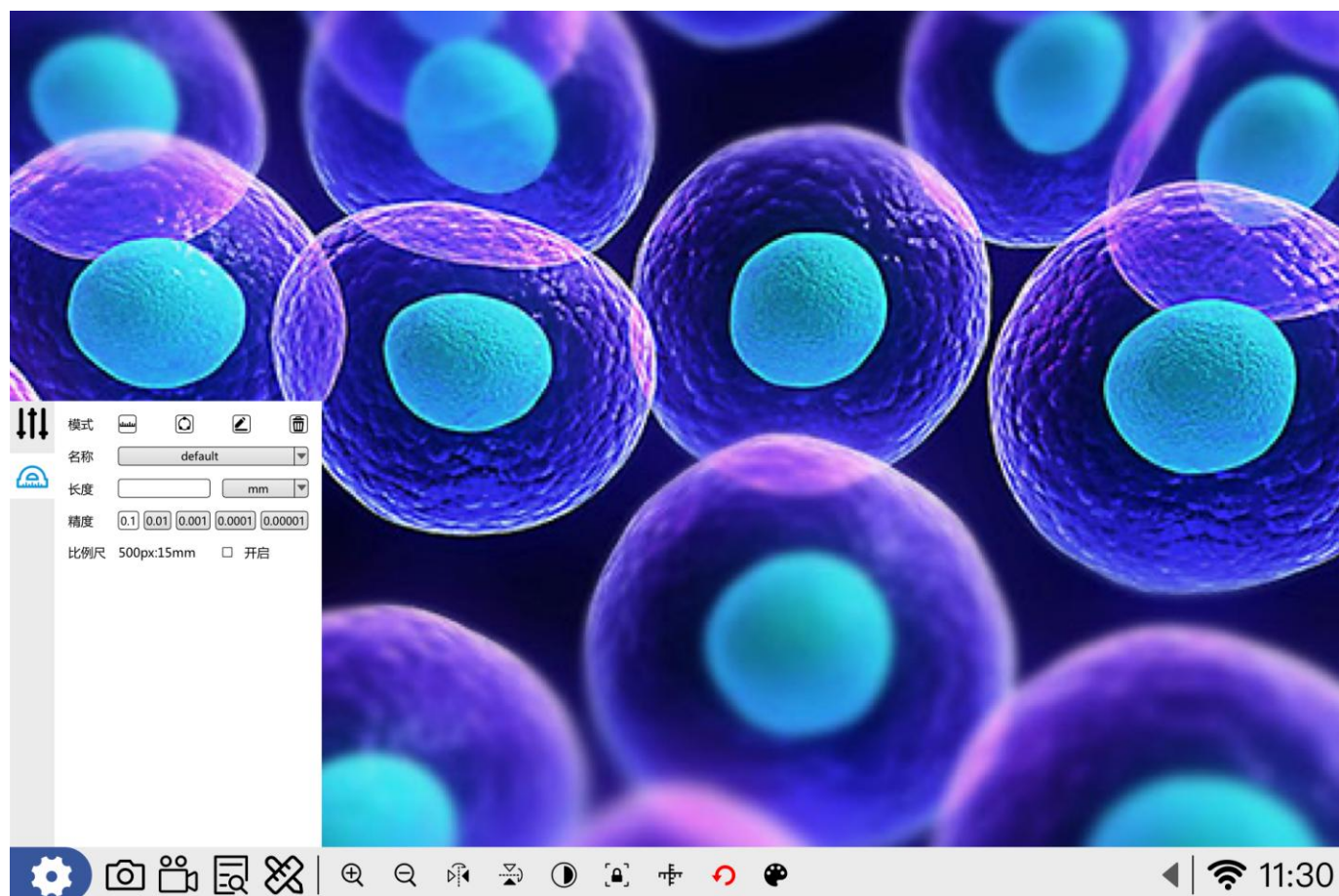

Haga clic para elegir el botón  para ingresar la medición. 

1) Modo: Proporcionar el modo de calibración, la calibración de línea y la calibración de círculo están disponibles para ser seleccionados. Después de hacer clic en el icono de calibración de línea, la interfaz de vista previa mostrará directamente el segmento de línea, de acuerdo con la

ubicación y la longitud de la escala de calibración, el mouse moverá el segmento de línea a la parte superior de la escala de calibración para superponerlo con la escala correspondiente. Establezca el nombre, la unidad, la precisión y, finalmente, haga clic en el icono de guardar para completar la calibración.


2)  Puede eliminar la información de calibración no deseada después de hacer clic en el icono de eliminación.

3) Nombre: después de dibujar el cursor del segmento de línea, se establece directamente en esta posición. Ingrese el nombre correspondiente y luego seleccione la unidad después de confirmar, el cursor salta a la siguiente ventana.

4) Precisión: Después de configurar el nombre y la unidad, debe establecer el número correspondiente de decimales para garantizar la precisión de la medición.

5) Escala: proporciona la opción de activar o desactivar la escala.

Modo de medición

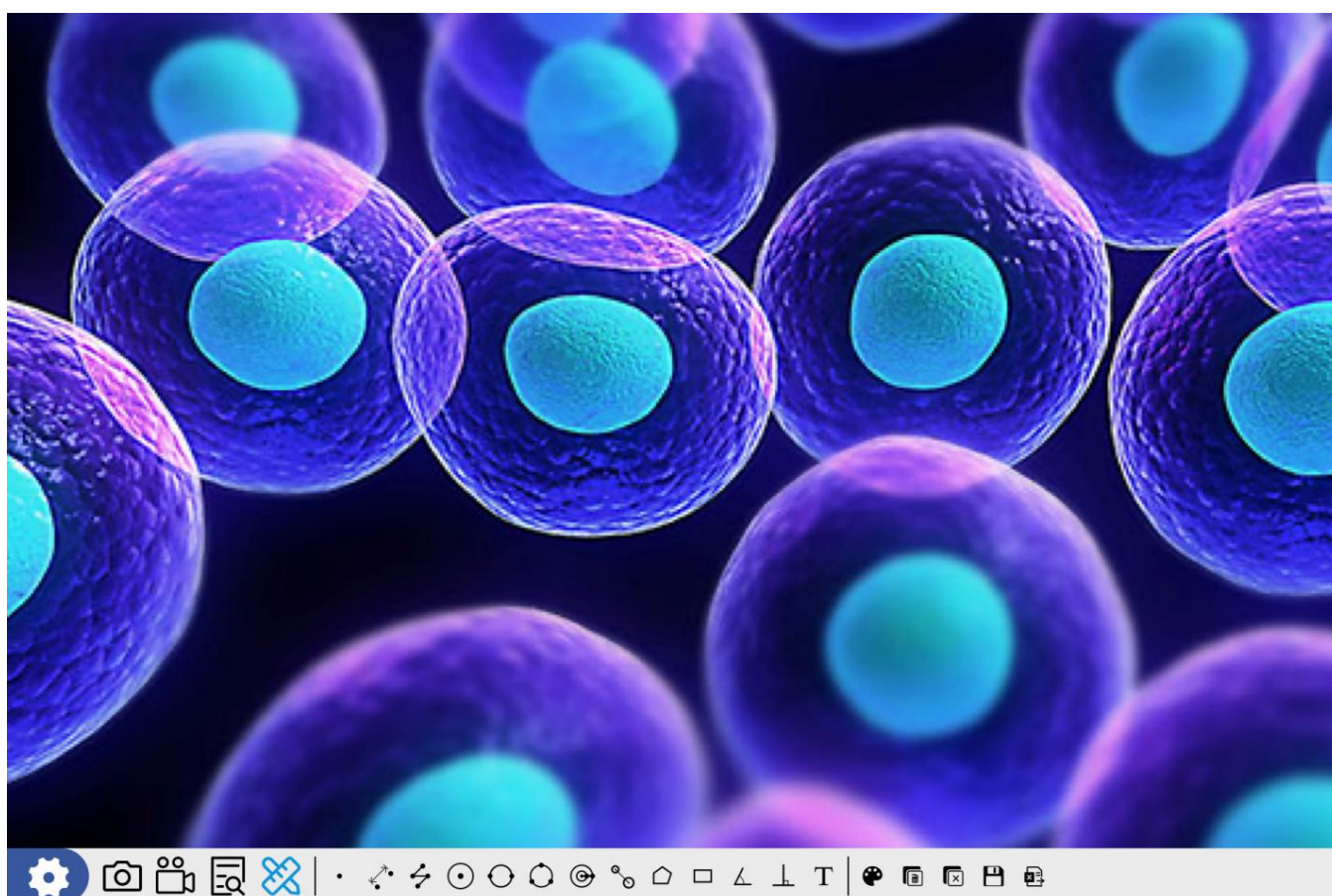

Haga clic para ingresar a la siguiente interfaz, y luego puede medir los objetos y tomar la captura de pantalla correspondiente o exportar el informe.



