

Con características únicas de gran calidad y diseño amigable, la estación de trabajo dental para veterinarios UD2 puede satisfacer completamente las necesidades de los veterinarios para el tratamiento dental de los animales. Está permitiendo a los veterinarios ofrecer el cuidado dental más completo y de la más alta calidad a los animales, incluido el corte, el esmerilado, el acabado, el raspado y el pulido, etc.

### Parámetros técnicos




Parte	Especificaciones
Compresor	Compresor de Aire libre de aceite
Poder	2.6-2.9A, 220/230V, 50/60Hz
Presión de salida	0.45~0.5MPa
Tanque de gas	8
Ruido	≤65dB
Pieza de mano de alta velocidad	300000-340000rpm-spray 3 puntos-luz LED
Pieza de mano de baja velocidad	2000-20000rpm
Escalador ultrasónico	Con luz blanca LED 28kHz±3kHz
Pieza de mano de succión	Sistema de succión de alto volumen
Unidad de fotopolimerización LED	Longitud de onda de luz:420-480nm
Dimensiones	L50*An46*Al91cm
Peso	Sobre 35kg

### Componentes



Descripción	
Compresor	1 pcs
Línea de poder	1 pcs
Pieza de mano de alta velocidad	1 pcs
Pieza de mano de baja velocidad	1 pcs
Pieza de mano escaladora	1 pcs
Jeringa de 3 vías Aire/Agua	1 pcs
Pieza de mano de succión	1 pcs
Unidad de fotopolimerización LED	1 set

## UD2 Unidad Dental

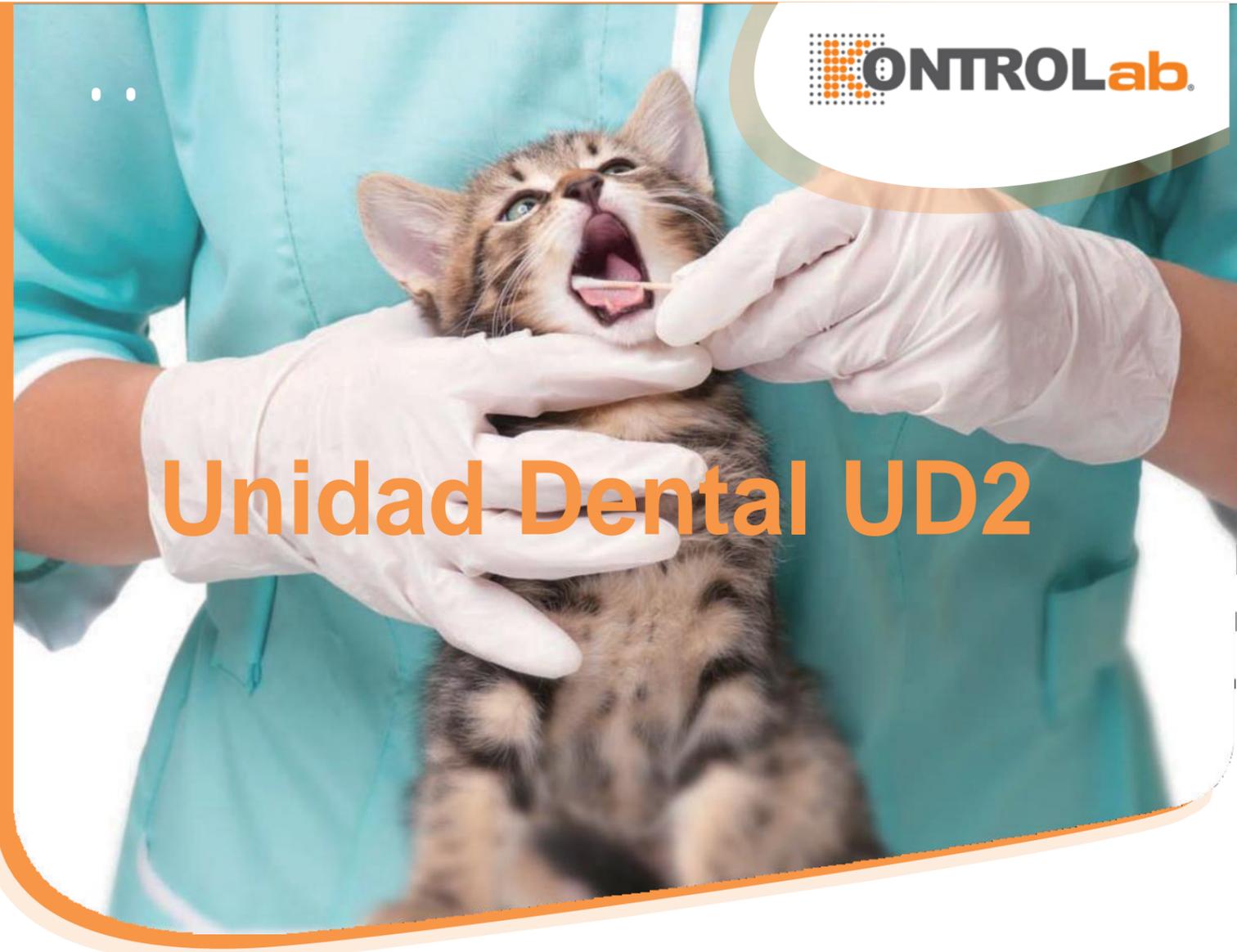

## Unidad Dental UD2

Diseñado para animales

Integral y profesional



MEJOR CUIDADO PARA ANIMALES




# UD2 Unidad Dental

La estación de trabajo dental UD2 se puede utilizar como una plataforma de trabajo dental integral para el pulido de dientes, la fotopolimerización, la restauración, el corte y el tratamiento del conducto radicular. También se puede usar para la belleza de los dientes de los animales, la extracción de dientes, el corte de tumores orales, etc., brindando más ayuda para el bienestar de los animales. También puede mejorar el manejo de los problemas orales de los animales por parte del veterinario de manera más eficiente.



UD2 Unidad Dental

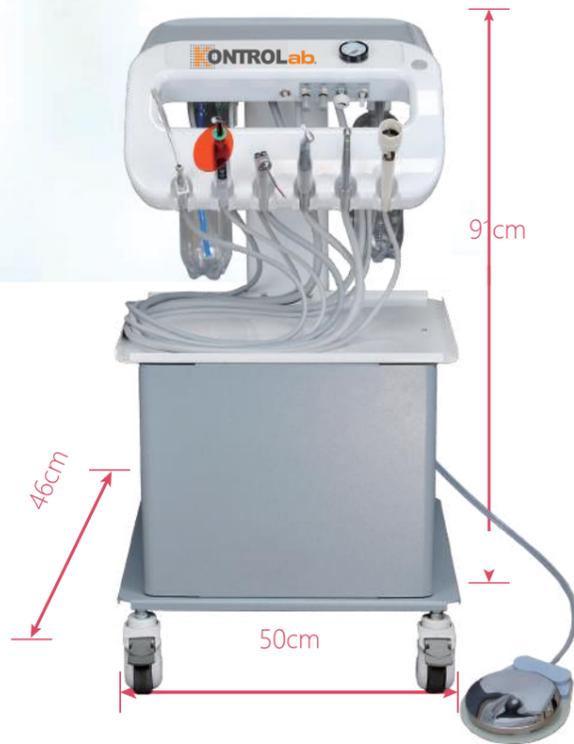

### Integral y profesional

Flexible y ahorra espacio;  
Diseño ergonómico y adecuado para veterinarias;  
Íntegro y profesional



### Alta eficiencia y bajo sonido

Compresor sin aceite de alta calidad, bajo ruido. Flujo de agua a presión controlable con sencillez y eficiencia



### Pieza de mano de alta velocidad

La luz LED aumenta la claridad de visión del spray de tres puntos, efecto de enfriamiento estable y bueno de la columna de agua en la aguja



### Escalador dental con luz LED

Enchufable con luz LED para una visión más clara del operador



### Jeringa de 3 vías aire/agua

Rotación de 360 grados, sin ángulo muerto, aguja puede autoclavarse



### Pieza de mano de baja velocidad

Micro motor de baja velocidad, canal interno de agua; máquina recta  
Abrazadera de pasador de anillo elástico móvil



### Unidad de fotopolimerización LED

Ahorra espacio y efectivo  
Mejor para restauración dental



### Pieza de mano de succión

Sistema de succión de alto volumen

## Equipo multifuncional dental

