

Bomba de Infusión Jeringa Veterinaria s400 Vet

Con la s400 Vet tus animales reciben el cuidado especial que requieren. Segura, infusiones precisas, así como la detección automática de la marca, tamaño y volumen del medicamento, haciendo fácil y rápido configurar una infusión para cualquier animal.





Entregar la precisa medicación dosificada hasta para el animal más pequeño. Las tasas de flujo entregan con +/- 2% de precisión, tan bajo como 0,1 ml/h.



Varios modos: Modo de rango, modo de tiempo, modo de peso, modo intermitente. Biblioteca de medicamentos.




Con alarma audible y visual, los cuidadores podrán localizar con facilidad la alarma.



Identifica de manera automática varios tipos y tamaños de jeringa desde 5 ml a 60 ml.

Los cuidadores pueden instalar o remover la bomba con facilidad gracias a la agarradera integrada y el soporte de poste giratorio.

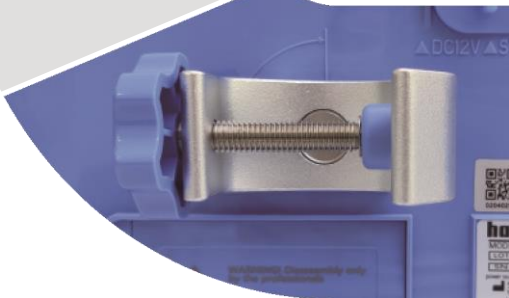

Protección avanzada contra humedad (IP24) para limpieza y desinfección. Resultados en estabilidad optimizada y menos costos de reparación.

- Compacto y ligero
- Indicadores de presión numérico y gráfico, ayudan a los cuidadores a identificar obstrucciones para prevenir riesgos potenciales
- Interfaz intuitiva con pantalla a color, información todo en uno para facilitar a los profesionales médicos la recepción de información de una manera comprensiva