


AN8
Máquina de Anestesia Veterinaria

Adhiriéndose al concepto de hacer anestesia animal. Más seguro, más sencillo y sin preocupaciones, AN8 se compromete a liderar una nueva experiencia en anestesia animal. Es aplicable a la anestesia clínica de perros, gatos, cerdos, monos, roedores, reptiles, etc.




¿Cómo funciona la AN8?

- O₂
- O₂+ Gas Anestésico
- O₂+ Gas Anestésico + CO₂

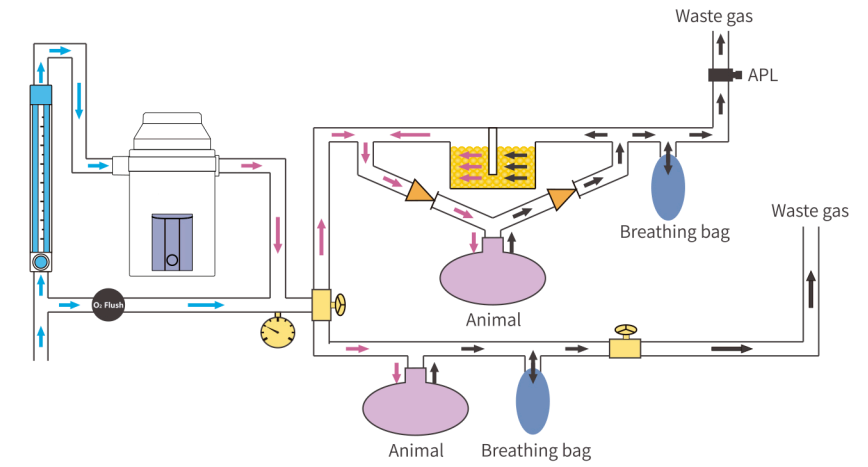


Vaporizador de Alta Precisión

Cada unidad se somete a una exhaustiva inspección de fábrica, asegurando la máxima precisión

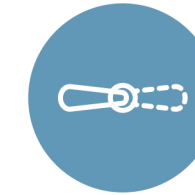

Diseño de Circuitos Duales

Equipado con ambos respiradores y circuitos sin reinhalación

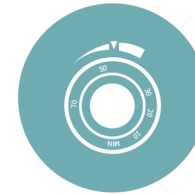

Válvula APL con Oclusión Rápida

Simplifica la ventilación manual, evita olvidarse de volver a abrir la válvula, garantiza la seguridad alveolar con Límite de presión de 30 cm H₂O




Buena Eliminación de Gases Residuales

Elimina eficazmente el gas anestésico residual en el quirófano



Diseño Integrado

Instalación compacta de monitor, ventilador, concentrador de oxígeno, etc.

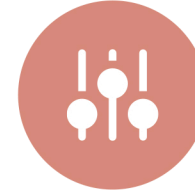

Elegancia Optimizada

Disposición oculta de tuberías, minimizando la exposición y riesgos de fuga



Manómetro válvula APL con escala filtro de gas para sistema de doble circuito



Interruptor de Circuito



Válvula APL con escala



Vaporizador



Filtro de Gas