



TOSOH

DESEGO[®]

Menú de Pruebas Tosoh AIA

Sistema de Reactivos en Copas de Unidad Unitaria

- Reactivo en Copas de Unidad Unitaria - No requiere pre-mezcla o pre-medida
- Formato: Reactivo en seco
- Reactivos comunes en todos los sistemas Tosoh AIA (Sustrato, Lavado y Diluyente)
- 90 días estabilidad de calibración en la mayoría de las pruebas
- Codidos de barra para fácil manejo de identificación de pacientes e inventario
- 10 minutos de incubación para la mayoría de las pruebas
- Libre de Biotina: Inmunoensayo diseñado sin riesgo de interferencia de biotina (Biotin-free)



Un Reactivo para todos los Sistemas Tosoh AIA

El formato de copas de reactivo AIA-Pack es el mismo en todos los analizadores Tosoh AIA. Los reactivos son intercambiables, de manera que laboratorios con más de un sistema Tosoh, puedan utilizar los mismos reactivos. La transición entre sistemas es perfecta asegurando resultados consistentes y una económica y eficiente operación para el laboratorio. El extenso menú incluye pruebas para: Tiroides, Anemia, Marcadores Tumorales, Diabetes, Marcadores Renales, Hormonas Reproductivas, Marcadores Cardíacos, Marcadores Metabólicos y más.



AIA-360
36 Pruebas/hora



AIA-900 *Sobremesa*
90 Pruebas/hora



AIA-900 *Con un clasificador de 9 bandejas*
90 Pruebas/hora



AIA-900 *Con un clasificador de 19 bandejas*
90 Pruebas/hora



AIA-2000
200 Pruebas/hora

TOSOH BIOSCIENCE

Menú Tosoh AIA

10 minutos de incubación (a menos que se indique lo contrario).

Marcadores Tumorales

AFP
CA 125
CA 27.29
CA 19-9
CA 15-3
CEA
PSA
PSA II
PSA libre
Tiroglobulina *

Diabetes

Insulina
Péptido C II

Tiroides

TSH
TT3
T4
FT3
FT4
T-Uptake
Tg Ab
TPO Ab
TSH 3rd Gen

Metabólicos

Cortisol
HGH

Marcadores Cardiacos

BNP
CKMB
Dímero D *
Mioglobina
Troponina I 2nd Gen
Troponina I 3rd Gen

Enfermedades Infecciosas

HBcAb
HBeAb
HBeAg
HBsAb
HBsAg

Hormonas

β -HCG
 β -HCG II
DHEA-S
Estradiol
hs Estradiol
FSH
HCG
LH II
Prolactina
Progesterona II
Progesterona III
SHBG
Testosterona

Anemia

Ferritina
Folato
RBC Folato
Vitamina B12

Marcadores Renales

Cistatina C
iPTH
Microglobulina β -2

Pruebas Adicionales

ACTH
Homocisteína
IgE II
Osteocalcina *
PAP
Vitamina D


40 min. de incubación. No disponible en el AIA-360.

No disponible en USA.

* Disponible pronto en Latinoamérica

Reactivos en Copas de Unidad Unitaria

- Copas de unidad unitaria utilizan el formato de reactivo en seco el cual no requiere pre-mezcla, pre-medida, o refrigeración abordo, lo que significa no desperdicio de reactivos.
- Formato de reactivo en seco asegura una larga estabilidad de calibración de 90 días para la mayoría de las pruebas.
- Reactivos tienen una vida útil de un año desde la fecha de manufactura.
- Las copas y bandejas Tosoh AIA vienen impresas con el código de la prueba y número de lote para permitir un manejo automatizado de programación e inventario en los modelos con clasificador AIA-2000 y AIA-900.
- Los reactivos ST AIA-PACK proveen un tiempo de respuesta más rápido debido a un protocolo de incubación de solo 10 minutos.

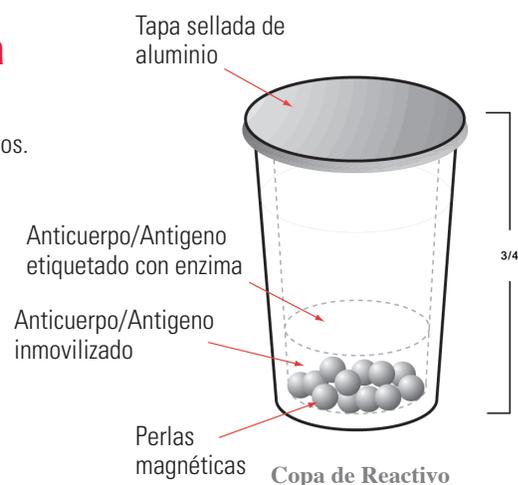

TOSOH BIOSCIENCE



www.desego.com
www.tosohbioscience.us