


**PANTALLA RETINA  
PARA MICROSCOPIO**

# **SCOPEPAD LX105**

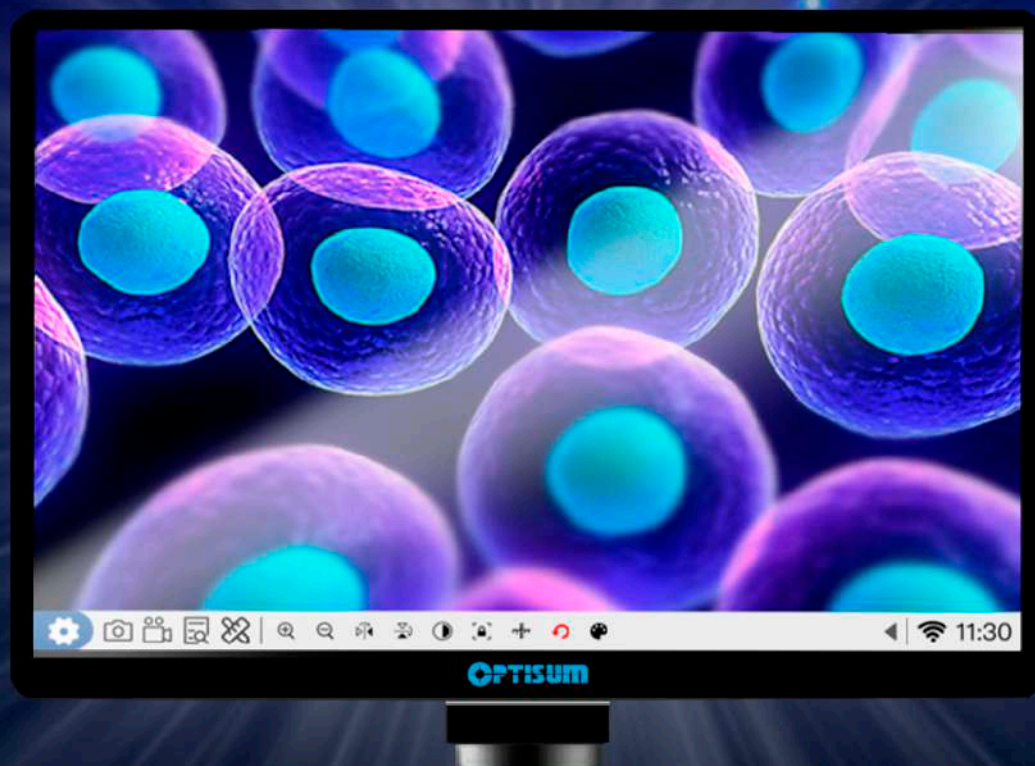

**DESEGO<sup>®</sup>**

**OPTISUM**

Características principales:

- 1. Cámara de tableta inteligente del sistema Android 11.
- 2. Pantalla HD 3:2 de 10,5", mejor campo de visión.
- 3. Cámara 4K de superficie de destino 1/2 incorporada, los detalles son claramente visibles.
- 4. Múltiples interfaces externas, fáciles de usar.
- 5. Sistema de entretenimiento de audio incorporado, es un dispositivo de la industria y un dispositivo de entretenimiento.
- 6. WIFI6 adaptable, interactivo y buen asistente de enseñanza.

Operación:

- 1. En primer lugar, el producto se conectará a la alimentación DC-12V.
- 2. Después de conectar la alimentación, presione el botón de encendido, la luz azul permanece encendida.
- 3. Después del encendido, el sistema directamente en la interfaz de vista previa de la imagen.
- 4. Puede conectar la pantalla grande a través de la interfaz HDMI de acuerdo con las necesidades reales.
- 5. Puede realizar la medición de imagen correspondiente y el ajuste de parámetros en la interfaz del software según sea necesario.

|         |                              |                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPEC.   | Modelo                       | Scopepad-LX105                                                                                                                                               |
|         | Categoría                    | Cámara de tableta con sistema Android 11 todo en uno HD                                                                                                      |
|         | Sensor                       | 1/2" sensor                                                                                                                                                  |
|         | Pixel efectivo               | 8M                                                                                                                                                           |
|         | Pantalla                     | Pantalla táctil de alta definición de 10,5"                                                                                                                  |
|         | Sistema operativo            | Android 11                                                                                                                                                   |
|         | WIFI                         | WIFI de doble banda de 2,4 GHz/5GHz, compatible con WIFI6                                                                                                    |
|         | Bluetooth                    | Bluetooth 5.0                                                                                                                                                |
|         | Salida                       | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, puerto LAN Gigabit                                                                                                                 |
|         | Tamaño de pixel              | 2.0um*2.0um                                                                                                                                                  |
|         | Poder                        | DC-12V/2A                                                                                                                                                    |
| FUNCIÓN | Función Básica               | Interacción con Android, software de medición seye 2.0                                                                                                       |
|         | Ajuste de Imagen             | Brillo, Contraste, saturación, Temperatura de color                                                                                                          |
|         | Función de Cámara            | Espejo, volteo, congelación, blanco y negro                                                                                                                  |
|         | Interfaz de Usuario          | Admite una operación táctil y de mouse fácil de usar                                                                                                         |
|         | Foto, Video                  | Admite captura de imágenes de 16 millones y video 1080p                                                                                                      |
|         | Almacenamiento               | Grabación instantánea de fotos y videos, vista previa de imágenes                                                                                            |
|         | Función de marcado           | Coordenadas de punto, punto de mira, sistema de coordenadas, anotaciones de texto                                                                            |
|         | Medición de Longitud         | Longitud de línea recta, longitud de línea plegada, longitud de curva, distancia de línea paralela, distancia e línea de punto                               |
|         | Medición de geometría        | Longitud del Segmento de línea, círculo, fijo de radio, círculo fijo de dos puntos, círculo fijo de tres puntos, círculo concéntrico, círculo fijo de radio. |
|         | Medición del área geométrica | Polígono, rectángulo                                                                                                                                         |
|         | Sistema de Medición          | Software S-EYE incorporado                                                                                                                                   |
| PAQUETE | Tamaño                       | 238.00*51.00*206.00mm                                                                                                                                        |
|         | Peso                         | 0.6 kg                                                                                                                                                       |
|         | Accesorios                   | DC-12V/2A Power                                                                                                                                              |